




Produktinformation

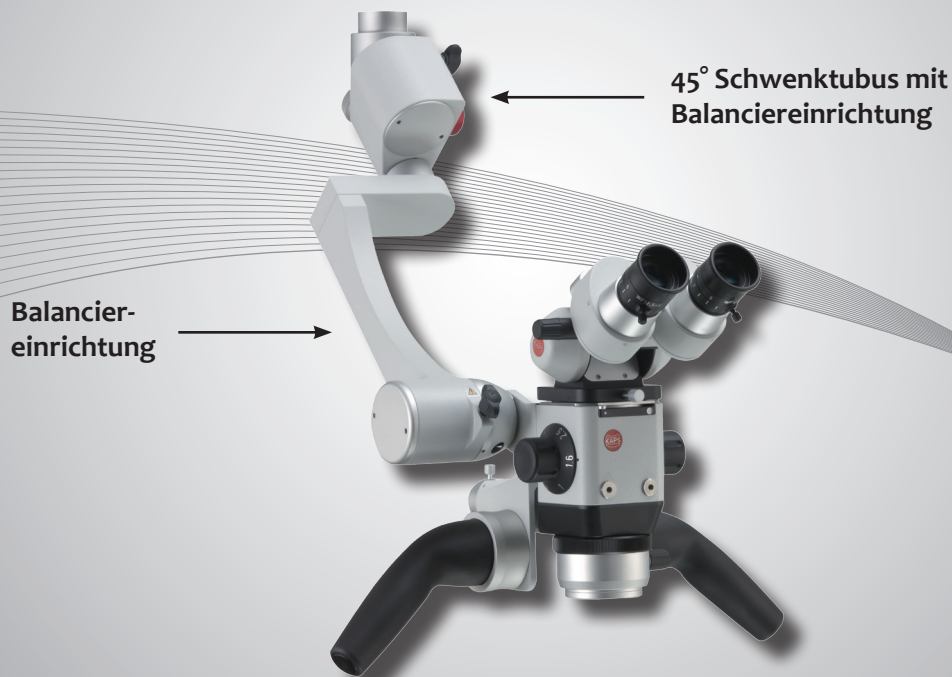

Kaps Balanciereinrichtung

Perfektes Ausbalancieren Ihres Mikroskops

Die Kaps Balanciereinrichtung dient zur optimalen Balancierung des Mikroskops.

Die 45° Schwenkkupplung mit Balanciereinrichtung ist zwischen dem Mikroskopträger und dem Schwebearm eingebaut.

Durch das Anbringen von Zusatzgeräten, wie z.B. Mitbeobachtertubus oder Fotokamera entstehen unsymmetrische Lastenverteilungen. Das ist mit der Balanciereinrichtung kein Problem mehr. Der Mikroskopkopf wird in jede beliebige Position eingeschwenkt und im Nu wieder ausbalanciert. Unerwünschte seitliche Schwenkbewegungen gehören der Vergangenheit an. Mit einem Drehknopf können Sie die Gängigkeit der Bewegung einstellen.

- ➡ Bestell-Nr. 112-420-000 Balanciereinrichtung (für 101-130-000 / 101-132-000)
- ➡ Bestell-Nr. 112-450-000 45° Schwenkkupplung mit Balanciereinrichtung